

Syncrus HLX Full

[Dental Sets](#) > [Syncrus HLX Full](#) > [Syncrus HLX Full in Options](#)


Syncrus GLX křeslo
HLX Full nástrojové rameno
LED PLUS OP světlo - 35.000 LUX
Syncrus Alcance 3T plivátkový blok

Volitelné sady:

Multimediální sada – monitor, intraorální kamera
Bělící lampy LED CL Alcance

Vlastnosti

Projektováno podle mezinárodních standardů kvality, Syncrus HLX Full Laser Electronic disponuje moderní technologií a novinkami od firmy Gnatus

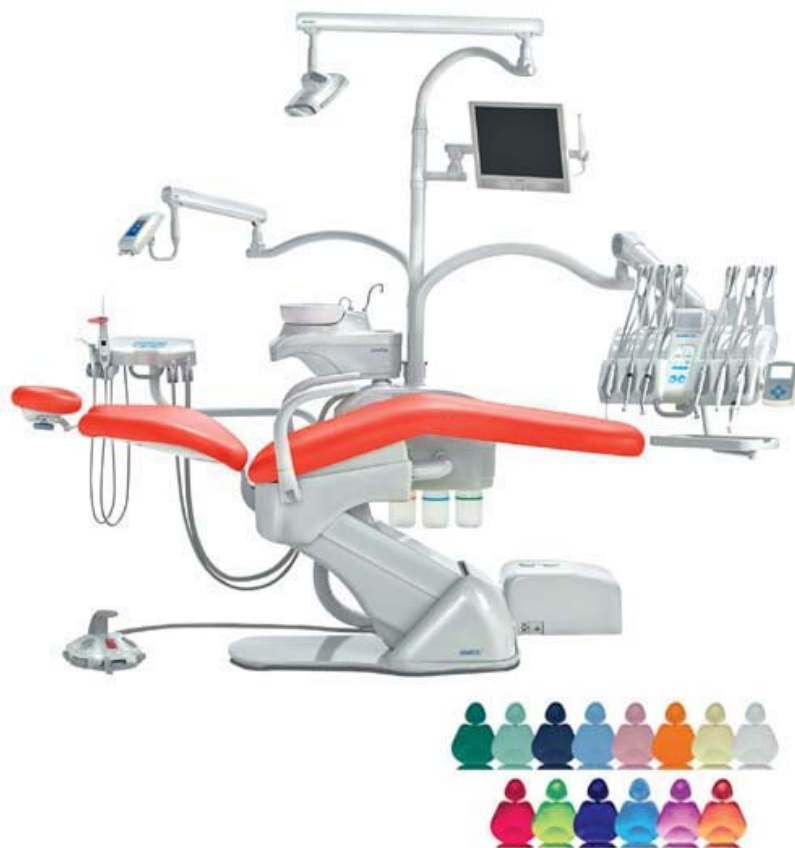

Barevný vzorník

Široká nabídka moderních a pastelově atraktivních barev polstrování:

bílá, žlutá, oranžová, salmon růžová, modrá, navy modrá, zelená, tmavá zelená, metalická červená, metalická zelená, metalická navy modrá, metalická nebesky modrá, metalická růžová, metalicky měděná

Dentální křeslo

Syncrus GLX křeslo

Ergonomický tvar

Synchronizovaný pohyb sedáku a opěrky zad s Trendelemburg polohou

Snadná aktivace funkcí

Anatomická záda poskytuje perfektní polohu pro pacienta

Výškově nastavitelná a snadno ovladatelná opěrka hlavy

Integrovaný nožní ovladač

Speciálně vyvinutý unifikovaný systém ovládání nožním spínačem – aktivace a programování pohybu křesla, spínání a nastavení intenzity LED OP světla, plynulá regulace výkonu jednotlivých nástrojů, bezpečnostní spínač blokáce pohybu křesla, plovatková poloha

Rameno nástrojů

HLX Full Laser Elektronik nástrojové rameno

1 3-funkční stříkací pistole

2 světelné hadice Midwest

1 světelná hadice MM Bien air

-široký a plynulý rozsah otáček (100 – 40000 otáček)

1 sonický odstraňovač zubního kamene

Ovládací panel s hlavními ventily, tlakoměrem a vypínačem.

Vhodné pro hygienu, ale i náročné stomatology.

Centrální ovládací panel s prvky ovládání:

Tlačítka ovládání pohybu křesla

Bezpečnostní stop tlačítka pohybu křesla se světelnou signalizací

Negatoskop

Bio-systém vnitřní dezinfekce nástrojů a hadic

Programovatelný oplach plivátka

Programovatelné plnění kelímku

poloha vyplachování pacienta s návratem do poslední pracovní polohy

Funkce perio/endo/scaler multifunkční OZK

Operační světlo

LED PLUS OP světlo - 5 Led

Nejvyšší kvalita barvy světla

Koncentrované světlo s přesným ohniskem bez ohřevu – 5 LEDek

Zvýšená kvalita diagnostiky

LED: dlouhá životnost (více než 50,000h), nižší spotřeba a vyšší intenzita

Plivátko

Syncrus Alcance 3T plivátko

Sací sada CATTANI s 2 sacími koncovkami (Ø 11 and Ø 17mm)

Vyjímatelný filtr, zabezpečující základní hygienu odsávacího systému