


Vyvolávací automat rtg. snímků XR 04



- automatické vyvolávání intraorálních snímků o velikosti 2x3, 3x4 a 2,7x5,4 cm, bez sušení
- přístroj je vybaven nastavcem pro práci při denním světle
- doba vyvolání 2-6 min.
- vkládání filmu každých 18 s
- typ 1740-01 - bez ohřevu vyvolávacích lázní /pokojová teplota/
- typ 1740-03 - s ohřevem vyvolávacích lázní /konstantní teplota 25°C/
- součástí dodávky přístroje jsou 4 dávky vývojky a ustalovače
- výměna vyvolávacích tekutin po 3 týdnech nebo 200 snímcích /platí pro vyvolávací tekutinu Dürr - Periomat Intra/
- základní provedení je připraveno k instalaci na zeď
- možno doobjednat stojan k instalaci na stole 1740-012-00

1740-01	XR 04, bez ohřevu, vč. držáku k instalaci na zeď, se zabudovaným zařízením pro práci při denním světle, 4 vsádky vyvolávacích tekutin
1740-03	XR 04, s ohřevem, vč. držáku k instalaci na zeď, se zabudovaným zařízením pro práci při denním světle, 4 vsádky vyvolávacích tekutin
1740-012-00	stojan k instalaci XR 04 na stůl
CXB200C9940	Periomat Intra - vyvolávací tekutiny pro Periomat/Periomat Plus a XR 04, 4 vsádky

Vyvolávací automat rtg. snímků Periomat Plus

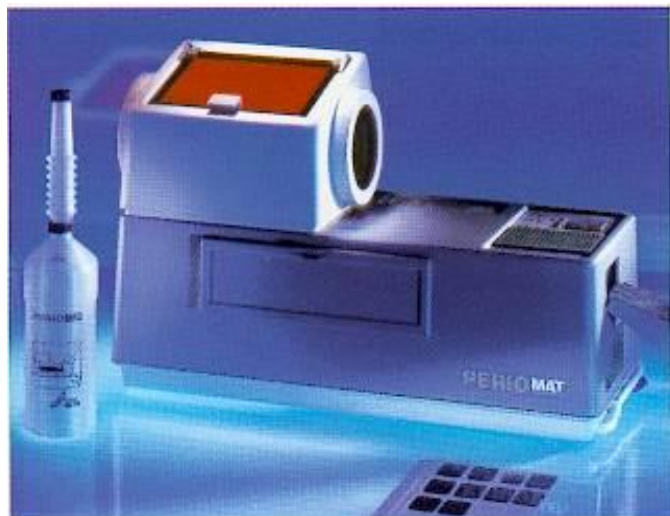

- Za 5 min. suchý snímek
- Současné vyvolání až 8 snímků
- Nastavitelná teplota ohřevu +/- 0,5 °C
- Teplota vyvolávací lázně 25 °C
- Integrovaná předsádka pro práci při denním světle
- Bez adaptéru: pro rozměr filmu 3x4
- S různými adaptéry pro rozměry filmů: 5.7x7.6, 4x5, 2.7x5.4, 2x3.5 a 2.4x4 cm

1308-01	Periomat Plus, bez zařízení pro práci při denním světle, s ohřevem, 4 vsádky vyv. tekutin
1307-01	Periomat Plus, se zařízením pro práci při denním světle, s ohřevem, 4 vsádky vyv. tekutin
1304A710-00	zařízení pro práci při denním světle /k 1308-01/
CXB200C9940	Periomat Intra - vyvolávací tekutiny pro Periomat/Periomat Plus a XR 04, 4 vsádky
1304-070-00	Perioclean-Set - k čištění transportních cest pro všechny typy Periomat, sestávající se z čistící vany, 2x čistící tekutina a čistícího kartáčku
CCB800C5540	WR 2000 - sprej k čištění transportních mechanismů,

Vyvolávací automat rtg. snímků XR 24 PRO



- Maximální formát filmu 24x30 cm
- Procesorem řízené vyvolání
- Profesionální ovládání „listováním v menu“
- 3 nastavitelné doby vyvolání:
„Intra“ – 6 min.
„Extra“ – 4 min.
„Endo“ – 2 min. 45 sek.
- Přehledný displej
- Jednosložkové vyvolávací tekutiny
- Možnost připojení regenerační jednotky
- Možnost připojení předsádky pro práci při denním světle

1700-08	XR 24 Pro, vč. vyvolávacích tekutin /2 vsádky/
1330-001-51	Aquastop - přístroj k zamezení poškození vyv. automatu vodou
1700-820-00	regenerační zařízení pro XR 24 Nova/Pro
1700-212-00	set k instalaci regeneračního zařízení 1700-820-00 na vyv. Automat XR 24 II/Nova
1700-910-00	DL 24 - zařízení pro práci při denním světle do formátu 15x30 cm, vhodné pro všechny typy vyv. automatu XR 24
1700-920-00	DL 26 - zařízení pro práci při denním světle do formátu 24x30 cm, vhodné pro všechny typy vyv. automatu XR 24
1700-930-00	zařízení pro temnou komoru
CXB140C9940	Dürr Automat XR New - 2 vsádky vyvolávacích tekutin /2x5 l vývojky a 2x5 l ustalovače/, pro všechny typy vyv. automatu XR 24 a AC 245